

E5 πολυ-λειτουργική θερμαινόμενη συσκευή μυοδιέγερσης



E5



«Το τεχνικό εργαστήριο της Nuga Best, εδώ και πολύ καιρό ερευνά την ποδιατρική ως μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους αποκατάστασης της υγείας. Με πολύ επιτυχημένο πρόδρομό της τη συσκευή Bioheart ή αλλιώς «δεύτερη καρδιά», η εταιρεία μας δημιούργησε ένα πιο ολοκληρωμένο και εξελιγμένο προϊόν, το E5.

Η συσκευή E5 κατάφερε να συνδυάσει επιτυχώς αρχαίες μεθόδους της ανατολικής ιατρικής μαζί με τη ρεφλεξολογία άνω και κάτω άκρων ταυτόχρονα και την αποκλειστική εφεύρεση της Nuga Best, το Τουρμάνιο (TC™) και το Τουρμάνιο με Νανοδιαμάντι (NDT™). Ευχαριστώ όλους τους επισκέπτες των καταστημάτων σε όλο τον κόσμο για τη χρήση του εξοπλισμού μας και να θυμάστε: οι καρδιές μας είναι πάντα ανοιχτές για εσάς.»



Πρόεδρος Nuga Global, Cho Seung Hyun

Αγαπητοί Μας Φίλοι!

Η «NUGA BEST» είναι πρόθυμη ανά πάσα στιγμή να συμβάλει στην βελτίωση της υγείας Σας και στη θεραπεία του οργανισμού Σας!!!

Όλη η οικογένεια μας, ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΡΙΘΜΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 25.000 μέλη, είναι ευγνώμων που είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει τη Nuga Best και στην Ελλάδα!

Σας περιμένουμε κάθε μέρα για ΔΩΡΕΑΝ μασάζ και δοκιμή των προϊόντων στα σαλόνια μας! Για να είστε πάντα υγιείς! Κι επειδή εμείς γνωρίζουμε τα θαύματα της NUGA BEST θα θέλαμε να τα μοιραστούμε μαζί Σας!

Γενικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Tzonio Todorov





Ρεφλεξολογία: Μια εναλλακτική μέθοδος βελτίωσης της υγείας του σώματος, από την κορυφή ως τα νύχια

Ρεφλεξολογία είναι η εφαρμογή πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία και περιοχές των ποδιών, των χεριών ή των αυτιών και είναι μια μέθοδος αυτοθεραπείας. Θεωρείται ευρέως ότι τα αντανακλαστικά σημεία αντιστοιχούν σε διαφορετικά όργανα και συστήματα του σώματος και ότι η πίεσή τους έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία του ατόμου.

Στα πέλματα καταλήγουν 7.200 νευρικές απολήξεις και η εφαρμογή πίεσης προκαλεί ένα "αντανακλαστικό" ερέθισμα σε διάφορα σημεία και όργανα του σώματος ξεχωριστά, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των λειτουργιών, την εξισορρόπηση και τη χαλάρωση του οργανισμού.

Εκατομμύρια άνθρωποι όλων των ηλικιών σε όλο τον κόσμο τη χρησιμοποιούν για να συμπληρώσουν άλλες θεραπείες, όταν αντιμετωπίζουν καταστάσεις όπως άγχος, άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα, διαβήτη, πονοκέφαλο και ιγμορίτιδα.

Τα οφέλη του μασάζ στα πόδια

- “Αφαιρεί” αποτελεσματικά το άγχος. Οι ειδικοί βρήκαν χαμηλό επίπεδο κορτιζόλης (της ορμόνης του άγχους) στους ανθρώπους, οι οποίοι συνηθίζουν να λαμβάνουν λουτρά για τα πόδια.
- Βελτιώνει τη φλεβική εκροή, κάτι που μειώνει το πρήξιμο των ποδιών και ανακουφίζει από την κόπωση.
- Ομαλοποιεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
- Διευρύνει τα τριχοειδή αγγεία, διαποτίζει τα όργανα με οξυγόνο, βοηθά να απαλλαγούμε από παγωμένα και μουδιασμένα πόδια - πολύ σημαντικό για άτομα με διαβήτη.
- Ενεργοποιεί τις μεταβολικές διεργασίες στο σώμα, βοηθά στην καύση επιπλέον θερμίδων, πράγμα που επηρεάζει αποτελεσματικά τη μείωση του βάρους.
- Επιταχύνει την αποβολή των τοξινών από το σώμα και τον καθαρισμό του αίματος και της λέμφου.
- Αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω της περιοδικής συστολής και διαστολής των πόρων του δέρματος.



Υγιή πόδια = Υγιής καρδιά

Σας φαίνεται παράξενο;

Τα πέλματά μας συγκεντρώνουν πολλά τριχοειδή αγγεία και πολλές νευρικές απολήξεις. Επειδή βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από τη καρδιά, το αίμα το οποίο κατεβαίνει κάτω δεν είναι τόσο θερμό. Συγχρόνως, από τα πέλματα το αίμα πρέπει να γυρίσει πίσω και για τον λόγο αυτό, με κάποιο τρόπο μοιάζουν με την καρδιά. Τη στιγμή που το αίμα το οποίο συγκεντρώνεται εύκολα στα πόδια δεν κυκλοφορεί ομαλά, συγκεντρώνονται απόβλητα και τοξίνες που μπορούν να προκαλέσουν βλαβερές ασθένειες στην καρδιά. Για να κυκλοφορήσει σωστά το νέο αίμα που παράγεται από την καρδιά, πρέπει το αίμα που είναι στις φλέβες των ποδιών μας (της 2ης καρδιάς) να απελευθερωθεί.

Η δομή που απελευθερώνει το αίμα είναι τα πόδια. Στην ουσία τα πέλματα είναι αντλία η οποία μετακινεί το αίμα στο πιο απομακρυσμένο από τη καρδιά σημείο του σώματος. Αν τα πέλματά μας είναι υγιή, τότε και η καρδιά είναι υγιής: η κυκλοφορία του αίματος είναι σωστή και δεν μαζεύονται τοξίνες. Γενικώς, τα υγιή πόδια σημαίνουν υγιή ψυχική κατάσταση, ορμονική ισορροπία, έλλειψη πόνου, αποτελεσματική αποκατάσταση από ασθένειες, καλό ύπνο, καλή πέψη και καλή κυκλοφορία του αίματος.





Πυραμιδάκια από Τουρμάνιο(TC™) και Τουρμάνιο με Νανοδιαμάντι(NDT™):

Και στα δύο τμήματα της συσκευής μασάζ για τα πόδια υπάρχουν επιφάνειες με στρογγυλεμένα πυραμιδάκια από Τουρμάνιο (TC™) και από Τουρμάνιο με Νανοδιαμάντι(NDT™). Μέσω αυτών πραγματοποιείται διαχείριση της συγκεντρωμένης θερμότητας, μασάζ ποδιών και πιεσοθεραπεία.



Η υπερυψωμένη επιφάνεια με Τουρμάνιο με Νανοδιαμάντι

σέβεται τη φυσική καμάρα του ποδιού και η κλίση των δύο επιφανειών είναι για την ανετότερη τοποθέτηση των ποδιών στη συσκευή.

Το κωνικό σχήμα της κορυφής δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η υπέρυθρη θερμότητα και τα ανιόντα συγκεντρώνονται καλύτερα στο πάνω μέρος της πυραμίδας, το οποίο έχει άμεση επαφή με την επιφάνεια του πέλματος και διεγείρει τις νευρικές απολήξεις των ποδιών.



Τηλε-χειριστήριο για άνετη χρήση

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλεχειριστήριο για όλες τις λειτουργίες για πιο άνετη χρήση.

Επιφάνειες διέγερσης με χαμηλή συχνότητα:

Σε αυτό το ειδικό τμήμα για τα πόδια πραγματοποιείται διέγερση με χαμηλή συχνότητα με ρύθμιση έντασης της ισχύος (1~20 επίπεδο).

Η δομή αυτή υποστηρίζει την καμάρα και βοηθά στη χαλάρωση των νεύρων για αποτελεσματική πρόληψη μυϊκού πόνου και ασθενειών.



Κόκκινες λυχνίες LED

Οι κόκκινες λυχνίες LED εκπέμπουν ακτινοβολία, η οποία, όταν απορροφηθεί, γίνεται κυτταρική ενέργεια, ενεργοποιώντας τις φυσικές κυτταρικές διαδικασίες του σώματος κι έχοντας ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα:


- αυξημένη κυκλοφορία του αίματος και δημιουργία νέων τριχοειδών αγγείων
- μείωση φλεγμονών
- ανακούφιση από μυοσκελετικούς πόνους
- ελαχιστοποίηση τραυματισμού των νεύρων



Οθόνη LED γραφικής απεικόνισης δεδομένων

Λειτουργεί σύμφωνα με τη συχνότητα εξόδου των κυμάτων χαμηλής συχνότητας.
Η EQ λειτουργία το καθιστά οπτικά πιο ενδιαφέρον.



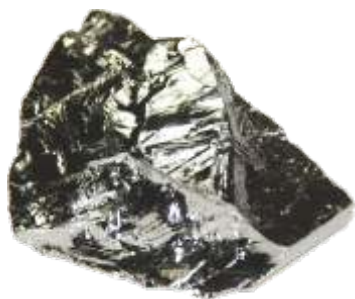

Γερμάνιο



Τουρμαλίνη



Ελβάν



Ηφαιστειακό πέτρωμα

Τουρμάνιο (TC™):

Η επαναστατική εφεύρεση της NUGA BEST

Το Τουρμάνιο είναι η αποκλειστική και επαναστατική εφεύρεση της Nuga Best - ένα πέτρωμα το οποίο αποτελείται από την ημιπολύτιμη πέτρα Τουρμαλίνη, Γερμάνιο, ηφαιστειακά πετρώματα και Ελβάν.

Η **Τουρμαλίνη** είναι το μοναδικό ορυκτό σε όλη τη Γη το οποίο έχει σταθερή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Το **Γερμάνιο** προάγει τον κορεσμό των ιστών με οξυγόνο, ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα και έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Το **Ελβάν** απορροφά και απομακρύνει τις τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα, έχει αντιβακτηριδιακό και αποσμητικό αποτέλεσμα.

Τα **Ηφαιστειακά πετρώματα** είναι σε θέση να διατηρούν τη θερμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το Τουρμάνιο ερχόμενο σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα αρχίζει να παράγει ήπια μαγνητικά πεδία φυσικής προέλευσης, υπέρυθρες ακτίνες μακρών κυμάτων και φυσικά υγιή ανιόντα. Όταν θερμαίνεται, η εκπομπή υπέρυθρων ακτίνων μακρών κυμάτων και αρνητικών ιόντων αυξάνεται και μεγιστοποιείται. Το φάσμα των υπέρυθρων ακτίνων, που εκπέμπει το Τουρμάνιο βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το μήκος του κύματος που εκπέμπεται από το ανθρώπινο σώμα και η μαγνητοθεραπεία με Τουρμάνιο έχει φυσική προέλευση και ήπια επίδραση. Όταν το Τουρμάνιο έρθει σε άμεση επαφή με το σώμα:

- Βοηθά στην ενδυνάμωση του κυτταρικού μεταβολισμού
- Αποκαθιστά τη λειτουργία του λεμφικού συστήματος
- Βοηθά στη διάσπαση του λίπους
- Υποστηρίζει την απώλεια λίπους
- Μειώνει την κατακράτηση νερού
- Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος
- Βοηθά στη βελτίωση της λειτουργίας του συκωτιού και των νεφρών
- Βοηθά στη βελτίωση της διάθεσης και την απαλλαγή από το στρες

Νανοδιαμάντι (NDT™): Η υπερσύγχρονη Τεχνολογία στην υπηρεσία της Υγείας

Η εταιρεία μας θέλοντας και έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των προϊόντων της, εφάρμοσε μια καινοτόμα κεραμική διαδικασία παραγωγής Τουρμανίου - αυτή τη φορά συνδυασμένου με Νανοδιαμάντι.

Το εργαστήριο NDT της Nuga Medical σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο Fraunhofer της Γερμανίας, είναι το πρώτο στον κόσμο που εφαρμόζει τη διαδικασία κεραμικής παραγωγής με προσθήκη Νανοδιαμαντιών μέσα στο κεραμικό μείγμα.

Η προσθήκη του Νανοδιαμαντιού στο ήδη πρωτοπόρο Τουρμάνιο «ενέτεινε» τις ευεργετικές ιδιότητες του τελευταίου. Μέσα από πολλαπλές έρευνες και πειράματα, απεδείχθη ότι το Τουρμάνιο σε συνδυασμό με Νανοδιαμάντι όντας μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον, όταν θερμαίνεται χαρακτηρίζεται από υψηλή θερμική αγωγιμότητα και εκπέμπει υπέρυθη ακτινοβολία μακρών κυμάτων πολύ ταχύτερα, έχοντας έτσι πιο άμεσες και πιο εμφανείς θετικές επιδράσεις στον οργανισμό.

Η άμεση επαφή του σώματος με το Νανοδιαμάντι, πυροδοτεί τις διαδικασίες της αποσυσσωμάτωσης του αίματος, της ταχύτερης αναπαραγωγής κυττάρων με ζωτικότητα και της καλύτερης κυκλοφορίας του αίματος.





Υπέρυθρη Ακτινοβολία Μακρών Κυμάτων (ΥΑΜΚ) Πως μας ωφελεί

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί υποβάλλονται στη φυσική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που φτάνει στη γη από τον ήλιο. Οι υπέρυθρες ακτίνες δεν είναι ορατές, αλλά μπορούμε να τις αισθανόμαστε σαν θερμότητα. Οι ζωντανοί οργανισμοί βιώνουν τις ευεργετικές επιδράσεις τους σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τα υποκυτταρικά οργανίδια και τελειώνοντας με ολόκληρο το σώμα. Οι υπέρυθρες ακτίνες δεν πρέπει να συγχέονται με τις καταστροφικές ακτίνες όπως το υπεριώδες φως, οι ακτίνες Χ ή οι ραδιενεργές ακτίνες.

Η υπέρυθρη ακτινοβολία μακρών κυμάτων είναι μια ζώνη ενέργειας στο πλήρες ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για χιλιέτιες για να διευκολύνει την αποκατάσταση από πολλές ασθένειες. Η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει βρει ευρεία εφαρμογή στην ιατρική πρακτική και την αισθητική. Συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας και της διάθεσης σε υψηλά επίπεδα, απομακρύνει τη κούραση, αυξάνει την απόδοση στην εργασία και την πνευματική διαύγεια.

Σε χημικό επίπεδο τα πρώτα που αλληλεπιδρούν με την υπέρυθρη ακτινοβολία είναι τα μόρια του νερού (ως γνωστόν, το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από περίπου 70% νερό). Τα ενεργοποιημένα μόρια αναζωογονούν τα κύτταρα και τονώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των τριχοειδών αγγείων, την παραγωγή κυτταρικού ιστού και την εξάλειψη μικροβίων που προκαλούν αλλεργίες.

Ηλεκτρική Διέγερση: Τι είναι και τι μας προσφέρει

Στο σώμα μας υπάρχει βιο-ηλεκτρική ενέργεια, η οποία είναι αρκετά αδύναμη ώστε να μην την αισθάνεται το σώμα, αλλά είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία του.

Η ηλεκτρική διέγερση είναι η πρόκληση συστολής των μυών με τη χρήση ηλεκτρικών παλμών και είναι μια μορφή ηλεκτροθεραπείας και άσκησης μυών.

Μέσω της ηλεκτρικής διέγερσης, εκπέμπονται μήκη κύματος και προκαλούν εις βάθος διέγερση στα επιθυμητά σημεία. Πρόκειται για μια συστηματική φυσική θεραπεία που βοηθά στην ανακούφιση των μυών. Οι χαμηλές συχνότητες προκαλούν δονήσεις, μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος και η θερμότητα μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια για να ενισχύσει τους μύς και να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος.

Η ηλεκτροθεραπεία χρησιμοποιείται για τη χαλάρωση των μυϊκών σπασμών, την πρόληψη και την επιβράδυνση της μυϊκής ατροφίας των ασθενών, την αύξηση της τοπικής κυκλοφορίας του αίματος, την αποκατάσταση των μυών, τη διατήρηση και την αύξηση του εύρους κίνησης, τη διαχείριση του χρόνιου πόνου, την πρόληψη φλεβικής θρόμβωσης και την επούλωση τραυμάτων.



Τμήμα εξωτερικής διέγερσης με χαμηλή συχνότητα

Ράβδοι χαμηλής συχνότητας με Τουρμάνιο:

Κατά τη διάρκεια χρήσης των ράβδων χαμηλών συχνοτήτων με Τουρμάνιο –ταυτόχρονα με τη συσκευή- διεγείρονται τα χέρια και τα πόδια, μεταφέρεται σε ολόκληρο το σώμα θερμική ενέργεια και ενεργοποιείται έτσι αποτελεσματικά ο μεταβολισμός του σώματος.



Βεντούζες χαμηλής συχνότητας:

Περιλαμβάνονται δύο ζευγάρια βεντουζών για τη χρήση της λειτουργίας της χαμηλής συχνότητας στα επιθυμητά μέρη του σώματος (άνω άκρα, γόνατα, κνήμες, αρθρώσεις του άνω τμήματος του κορμού) με αποτέλεσμα:

- Μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, εάν χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τη χαμηλή συχνότητα στα πόδια
- Εύκολη εφαρμογή χαμηλής συχνότητας στα δύσκολα προσβάσιμα μέρη του σώματος
- Άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους



Τι είναι τα αρνητικά ιόντα (ανιόντα) και πως ωφελούν την υγεία μας

Ο λόγος που το σώμα αισθάνεται ανανεωμένο ενώ βρίσκεστε στο ντους, σε ένα δάσος ή κοντά σε έναν καταρράκτη, σε μια θερμή πηγή ή στον ωκεανό, οφείλεται στο αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο που υπάρχει στον αέρα. Αυτά τα αρνητικά φορτισμένα σωματίδια ονομάζονται ανιόντα, ή αρνητικά ιόντα. Όταν ένα άτομο χάνει ένα ηλεκτρόνιο, γίνεται θετικό ιόν. Όταν ένα άτομο αποκτά ένα ηλεκτρόνιο, γίνεται αρνητικό ιόν. Τα ανιόντα προωθούν τον μεταβολισμό των κυττάρων, παρέχουν μια αίσθηση ευεξίας, αναζωογονούν το αίμα, ανακουφίζουν από την κούραση και απαλλάσσουν από το άγχος.

Ο ιονισμός, δηλαδή η θεραπεία με ανιόντα, είναι μια αποτελεσματική μέθοδος πρόληψης καρδιαγγειακών παθήσεων, αποκατάστασης του νευρικού συστήματος και ενδυνάμωσης του ανοσοποιητικού συστήματος ενός ατόμου.

Οι επιδράσεις του ιονισμού είναι:

Καθαρισμός αίματος

Το υγιές αίμα είναι ένα αδύναμο αλκαλοειδές. Τα αρνητικά ιόντα εξουδετερώνουν το όξινο αίμα και το μετατρέπουν σε ένα ασθενές αλκαλοειδές. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη γηριατρικών ασθενειών, καρκίνου και πολλών αλλεργιών.

Ανακούφιση από άγχος

Τα αρνητικά ιόντα διεγείρουν τα παρασυμπαθητικά νεύρα για να ηρεμήσουν την ψυχή και το νου και να ενεργοποιήσουν τις ορμόνες ενδορφίνες που ενισχύουν μια χαλαρή αίσθηση.

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Τα αρνητικά ιόντα ενισχύουν τα έντερα και το ήπαρ που βρίσκονται στο επίκεντρο του ανοσοποιητικού σας συστήματος. Διατηρώντας το ήπαρ και τα έντερά σας υγιή, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σας σύστημα.



Τι πρέπει να έχετε υπ' όψιν σας

1. Σε περίπτωση εμφάνισης αντιδράσεων, μην ανησυχήσετε. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε μεταβατική φάση και περνά στη διαδικασία της αυτοθεραπείας.
2. Αν έχετε ισχυρές αντιδράσεις, μειώστε τη θερμοκρασία της συσκευής, αλλά μη διακόψετε τις συνεδρίες μασάζ.
3. Πιείτε καθαρό νερό, μη ανθρακούχο (2.5 λίτρα τη μέρα, κατά μέσο όρο).
4. Να καταναλώνετε περισσότερα φρούτα και λαχανικά.
5. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, συμπληρώστε τη συνεδρία της συσκευής με τη χρήση του στρώματος Τουρμανίου σε χαμηλή θερμοκρασία ή ακόμα καλύτερα του εξοπλισμού N5.



Συνδυαστικός εξοπλισμός διέγερσης N5



Να είστε υγιείς με τη Nuga Best

"Τα πέλματα ενός ανθρώπου μοιάζουν με ρίζα ενός δέντρου. Το δέντρο μαραίνεται, ξεκινώντας από τη ρίζα, και ο άνθρωπος αρρωσταίνει ξεκινώντας από τα πόδια." (Από αρχαίο κινέζικο εγχειρίδιο ιατρικής)

Ένας άνθρωπος κάνει κατά μέσο όρο 7 χιλιάδες βήματα την ημέρα. Όταν φτάνουμε στα 70 έχουμε περπατήσει 220 χιλιάδες χιλιόμετρα - αυτή η απόσταση καλύπτει τη Γη στο σημείο του ισημερινού κατά 5.5 φορές.

Το υγιές πέλμα ενός ανθρώπου είναι ιδανικά σχεδιασμένο για να παρέχει τη σωστή υποστήριξη του σώματος και συνεχόμενη κίνηση και να αντέχει τα μοναδικά καθημερινά φορτία.

Οι επιστήμονες της Νοτιοκορεατικής εταιρείας Nuga Medical έχουν αναπτύξει ολόκληρη σειρά με μοναδικό εξοπλισμό, η οποία πάντα συνδυάζει την αρχαία ιατρική της Ανατολής με τις σύγχρονες τεχνολογίες υγείας. Κάντε μια συνειδητή επιλογή υπέρ του υγιεινού τρόπου ζωής μαζί με τη Nuga Best!

KOREA FAR INFRARED ASSOCIATION
KOREA INSTITUTE OF FAR INFRARED APPLIED SCIENCES

CERTIFICATE OF TESTING RESULT

Order No. of Order: 007107
 Name of Customer: HANJIN (P.O. Box No. 10700, 10700-010, Seoul)
 Address of Customer: 100, Jangjeon-ro, Gangnam-gu, Seoul 151-747, Korea
 Date of Order: 11.11.2010
 Name of This Order: **PERFORMANCE MEASUREMENT & RADIATION EFFICIENCY (GENERAL TEST)**

TEST RESULTS

Quantity	Sample Name
1.0 - 10.0 g	2010-001071
0.000	0.000 ± 0.000

1. Test Method: KIR 01-010
 2. The temperature of FTIR is controlled at 25 degrees.
 3. The data acquisition time is set 10 minutes at maximum.
 4. The KIR 01010 is used as a reference.
 5. The Order: 007107 is set.
 6. The test result is as follows.

11.11.2010
 Dept. *Choi T. A.*
 The Director of Korea Institute of
 Far Infrared Applied Sciences

COPY

KOREA FAR INFRARED ASSOCIATION
KOREA INSTITUTE OF FAR INFRARED APPLIED SCIENCES

CERTIFICATE OF TESTING RESULT

Order No. of Order: 007107
 Name of Customer: HANJIN (P.O. Box No. 10700, 10700-010, Seoul)
 Address of Customer: 100, Jangjeon-ro, Gangnam-gu, Seoul 151-747, Korea
 Date of Order: 11.11.2010
 Name of This Order: **PERFORMANCE MEASUREMENT & RADIATION EFFICIENCY (GENERAL TEST)**

TEST RESULTS

Quantity	Sample Name
1.0 - 10.0 g	2010-001071
0.000	0.000 ± 0.000

1. Test Method: KIR 01-010
 2. The temperature of FTIR is controlled at 25 degrees.
 3. The data acquisition time is set 10 minutes at maximum.
 4. The KIR 01010 is used as a reference.
 5. The Order: 007107 is set.
 6. The test result is as follows.

11.11.2010
 Dept. *Choi T. A.*
 The Director of Korea Institute of
 Far Infrared Applied Sciences

COPY

KOREA FAR INFRARED ASSOCIATION
KOREA INSTITUTE OF FAR INFRARED APPLIED SCIENCES

CERTIFICATE OF TESTING RESULT

Order No. of Order: 007107
 Name of Customer: HANJIN (P.O. Box No. 10700, 10700-010, Seoul)
 Address of Customer: 100, Jangjeon-ro, Gangnam-gu, Seoul 151-747, Korea
 Date of Order: 11.11.2010
 Name of This Order: **PERFORMANCE MEASUREMENT & RADIATION EFFICIENCY (GENERAL TEST)**

TEST RESULTS

Quantity	Sample Name
1.0 - 10.0 g	2010-001071
0.000	0.000 ± 0.000

1. Test Method: KIR 01-010
 2. The temperature of FTIR is controlled at 25 degrees.
 3. The data acquisition time is set 10 minutes at maximum.
 4. The KIR 01010 is used as a reference.
 5. The Order: 007107 is set.
 6. The test result is as follows.

11.11.2010
 Dept. *Choi T. A.*
 The Director of Korea Institute of
 Far Infrared Applied Sciences

COPY

KOREA FAR INFRARED ASSOCIATION
KOREA INSTITUTE OF FAR INFRARED APPLIED SCIENCES

CERTIFICATE OF TESTING RESULT

Order No. of Order: 007107
 Name of Customer: HANJIN (P.O. Box No. 10700, 10700-010, Seoul)
 Address of Customer: 100, Jangjeon-ro, Gangnam-gu, Seoul 151-747, Korea
 Date of Order: 11.11.2010
 Name of This Order: **PERFORMANCE MEASUREMENT & RADIATION EFFICIENCY (GENERAL TEST)**

TEST RESULTS

Quantity	Sample Name
1.0 - 10.0 g	2010-001071
0.000	0.000 ± 0.000

1. Test Method: KIR 01-010
 2. The temperature of FTIR is controlled at 25 degrees.
 3. The data acquisition time is set 10 minutes at maximum.
 4. The KIR 01010 is used as a reference.
 5. The Order: 007107 is set.
 6. The test result is as follows.

11.11.2010
 Dept. *Choi T. A.*
 The Director of Korea Institute of
 Far Infrared Applied Sciences

COPY






ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ & SERVICE:

Μεσογείων 328, Αγ. Παρασκευή
τηλ.: 210 2919113

nugabesthellas@nugabesthellas.gr

www.nugabesthellas.gr  Nuga Best Hellas

